



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

APP multisensorial
standing





Un nuovo concetto di statica.

App Multisensorial Standing è uno stabilizzatore progettato e realizzato da Ormesa con l'obiettivo di rendere piacevole e coinvolgente il momento di terapia attraverso una straordinaria esperienza multisensoriale.

Attraverso un kit elettronico brevettato fissato sotto la pedana, App Multisensorial Standing **trasforma qualsiasi segnale audio/video in vibrazione.**

Propagandosi attraverso tutta la struttura (pedana, ginocchiere, supporti e tavolo), **la vibrazione assicura al bambino un'esperienza multisensoriale gratificante.**

La sua struttura contiene senza costringere, adattandosi in maniera semplice ed efficace alle diverse necessità posturali.

PRODOTTO
MARCATO 

APP MULTISENSORIAL STANDING è un DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA definiti dal REGOLAMENTO (UE) 2017/745



Musica, ritmo, vibrazioni: collega il tuo dispositivo!

App Multisensorial Standing può essere collegato a qualsiasi dispositivo didattico e interattivo come tablet, computer, consolle, software didattici etc.

Il suono trasformato in vibrazione rinforza l'attività riabilitativa proposta, rendendola dinamica, interattiva e coinvolgente.
La statica si trasforma da passiva ad attiva.



Stimola l'apprendimento

Nei bambini con difficoltà di elaborazione degli input percettivi e degli output motori, **App Multisensorial Standing si dimostra un eccezionale strumento per la stimolazione e l'apprendimento.**

Con la musica, il ritmo e le vibrazioni, App Multisensorial Standing rivoluziona il momento della statica. Gli elementi di contenimento diventano veicolo di **nuovi stimoli** e di **gradimento per il bambino.**





Multisensoriale

Gli stimoli sensoriali aiutano a superare le barriere fisiche ed emotive

Il valore aggiunto di App Multisensorial Standing è quello di rendere più efficaci le proposte riabilitative che si pongono come obiettivo il **miglioramento della stazione eretta, dell'interazione con l'ambiente e delle capacità cognitive e oculo-manuali.**

Con App Multisensorial Standing **la terapia diventa un momento piacevole e divertente**, in grado di stimolare l'attenzione e la motivazione del bambino. Grazie all'ampia gamma di attività praticabili, **App Multisensorial Standing facilita l'intervento terapeutico e favorisce la partecipazione attiva del bambino.**

Utilizzando delle applicazioni causa-effetto (es. tamburi) si può lavorare a livello cognitivo e motorio: quando vengono toccati i vari tamburi, infatti, si producono suoni e vibrazioni di intensità diverse. Oppure, osservando il video di un'automobile da corsa che produce vibrazioni diverse al variare dei giri del motore, viene indotta nel bambino un'esperienza corporea realistica e coinvolgente.

Percezione



Rifiuto del momento della statica.

Scoperta



Percezione della vibrazione e scoperta del suono.

Motivazione



Accettazione della proposta riabilitativa.





**Caratteristiche
tecniche e regolazioni**



Telaio

senza sporgenze. Più sicurezza, rotazione del tronco e libertà di movimento degli arti superiori facilitate. Regolabile in altezza con sistema “**bloccaggio sicuro**”.

Tools free

regolazioni senza l'utilizzo di attrezzi ma tramite speciali pomelli, disegnati da Ormesa, con presa efficace e sicura. I pomelli mantengono efficacemente il serraggio attraverso un meccanismo interno che non segna e rovina il tubo.



Barre numerate

per ripristinare l'assetto posturale scelto dal terapeuta.



Pannello di controllo con kit elettronico

con regolazioni per il volume e per l'intensità della vibrazione.

Sistema elettronico brevettato.



Supporto pelvico e supporto toracico

regolabili in modo indipendente in circonferenza, in rotazione, in altezza e in antero-posteriore. In caso di sufficiente controllo del tronco è possibile rimuovere il supporto toracico.





Tavolo in legno multistrato di betulla

progettato per l'attività didattica e per il sostegno degli arti superiori, può essere rimosso per facilitare le attività di riabilitazione. Regolabile in altezza, inclinazione e in antero-posteriore.



Sostegni per le ginocchia

imbottiti, tappezzeria removibile per il lavaggio e con foro per scarico rotuleo. Regolabili in modo indipendente in altezza, in senso antero-posteriore, in rotazione e abduzione.



Fermatalloni

regolabili in larghezza e profondità.



Pedana in legno multistrato di betulla

con pannello comandi e QR code che rimanda a possibili applicazioni utilizzabili.




Ruote gemellate piene

diametro 75 mm, posteriori con freni. Le ruote consentono di spostare l'ausilio da una stanza all'altra anche durante l'utilizzo.



Componenti

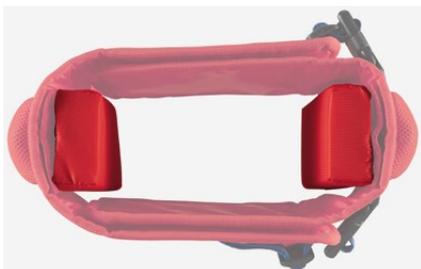

944 Riduttori di circonferenza
possibilità di stringere la circonferenza dei supporti per gli utenti più magri, inserendo gli appositi riduttori (spessore 3 cm cadauno).



865 Poggiatesta multiregolabile
regolabile in altezza, inclinazione e in antero-posteriore tramite pomelli.



859 Porta tablet
regolabile in altezza, inclinazione e in profondità tramite pomelli.





App misure e pesi

A: ingombro della base
 B: ingombro in lunghezza
 C: altezza pedana - tavolo
 D*: ingombro in larghezza
 E: altezza pedana - ginocchiere
 F: altezza pedana - supporto pelvico
 G: altezza pedana - supporto toracico
 L: circonferenza minima supporti
 M**: larghezza interna supporti
 N: altezza utente
 Peso Ausilio
 Portata Massima

misura 1


66 cm
 da 76 a 88 cm
 da 49 a 77 cm
 64 cm
 da 14 a 24 cm
 da 41 a 55 cm
 da 53 a 72 cm
 60 cm
 18 cm
 da 75 a 100 cm
 24,6 kg
 35 kg

misura 2

70 cm
 da 78 a 90 cm
 da 59 a 87 cm
 65 cm
 da 14 a 36 cm
 da 52 a 68 cm
 da 67 a 94 cm
 65 cm
 22 cm
 da 90 a 125 cm
 26 kg
 45 kg

misura 3

73 cm
 da 80 a 92 cm
 da 69 a 100 cm
 70 cm
 da 14 a 42 cm
 da 62 a 86 cm
 da 82 a 110 cm
 70 cm
 29 cm
 da 120 a 150 cm
 28,5 kg
 55 kg

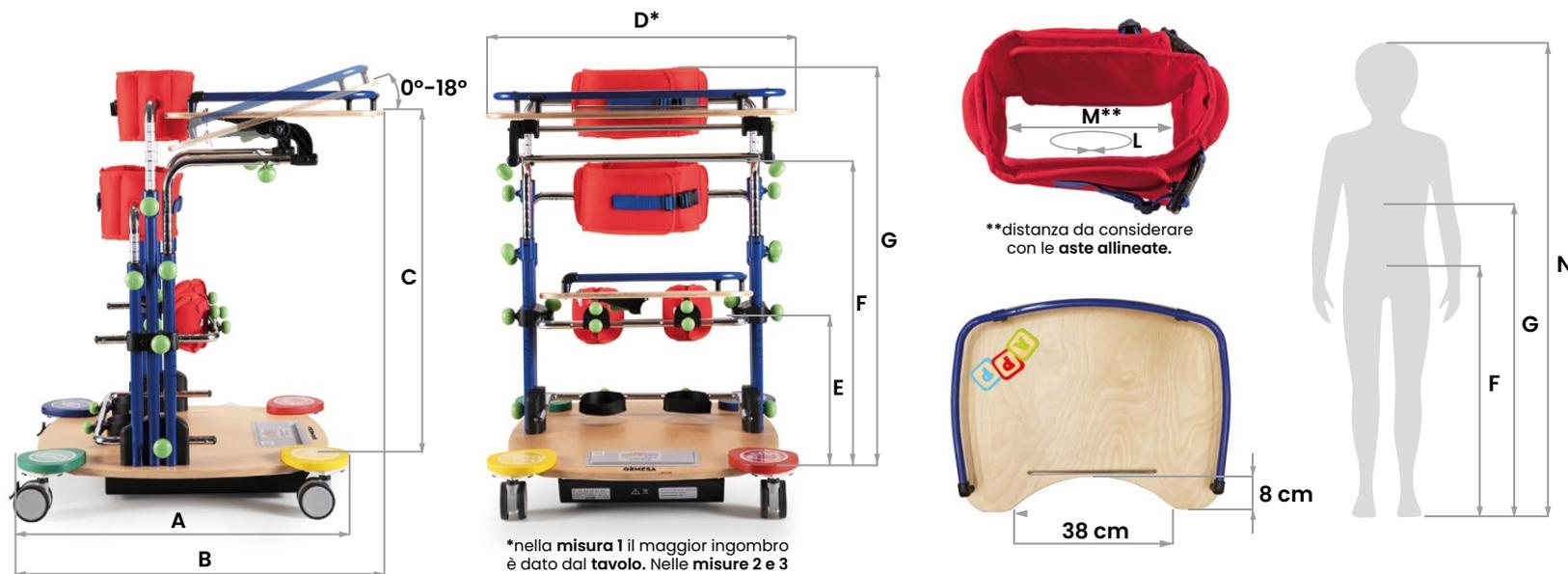


Assicurarsi che le altezze F e G rappresentate in figura, rientrino nel range di misura indicato per il supporto pelvico e toracico.







Simone e la sua storia vi aspettano
nel sito ufficiale di Ormesa, assieme
agli altri protagonisti della nostra
fantastica community globale.

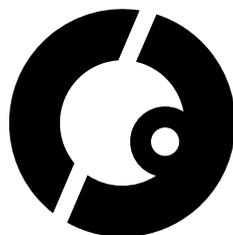

**Un ringraziamento speciale alle famiglie che hanno
partecipato con entusiasmo al nostro progetto.
È grazie ai nostri clienti e alle loro storie che troviamo
l'energia e gli stimoli per evolvere giorno dopo giorno.**

CE conforme a MDR (UE) 2017/745

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= **ISO 13485** =

Ormesa srl - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com