



**ORMESA®**  
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

DUECENTOTRE5



DUECENTOTRE5

KORBITZ 3 1100 340-012 330N  
The wheel chair is designed for use in the home and for short distances.  
Made in Germany  
CH 19



# DUECENTOTRE5

## Benessere diffuso: traspirabilità ed affidabilità.

La Duecentotre5 di Ormesa è una carrozzina contenitiva altamente performante, la soluzione ideale per tutti gli utenti che necessitano di un **sistema di seduta sicuro, ergonomico e in grado di garantire una postura ottimale in ogni occasione.**

La conformazione dello schienale e lo speciale rivestimento di tutta la seduta garantiscono **traspirabilità e comfort.**

La regolazione della reclinazione con molla a gas consente di **modificare la posizione in modo facile e confortevole** per tutto il giorno.

PRODOTTO  
MARCATO 

203-5 è un DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA definiti dal REGOLAMENTO (UE) 2017/745





# Praticità al servizio del comfort

Lo **schienale avvolgente e contenitivo** ha una conformazione tale da evitare contatto e compressioni lungo i corpi vertebrali. **Regolabile su due posizioni** in profondità.

La **seduta leggermente basculata**, rivestita da un materiale esclusivo, evita lo scivolamento in avanti dell'utente.

Il **poggiatesta ampio**, con rivestimento **antibatterico**, garantisce un corretto posizionamento del capo nei casi di scarso controllo. Regolabile in inclinazione, altezza ed in senso antero-posteriore.

Queste caratteristiche rendono la carrozzina **Duecentotre5** un **ausilio in grado di migliorare sensibilmente la qualità di vita dell'utilizzatore** e di ridurre al minimo gli sforzi per l'assistente.




# Caratteristiche tecniche e regolazioni



## Rivestimento

**Sedile e schienale** accolgono le forme delle spalle e dei glutei e sono rivestiti da uno speciale materiale esclusivo: **ignifugo, visco-elastico, indistruttibile, igienico, lavabile e traspirante.**

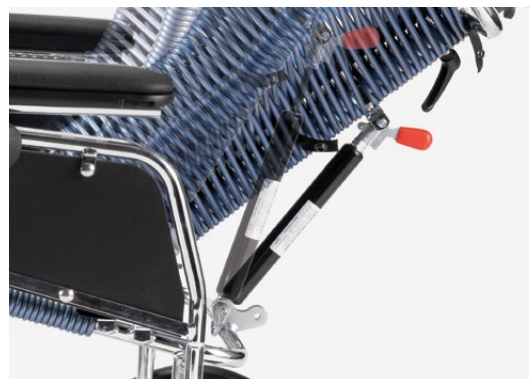

## Schienale

Regolabile in inclinazione tramite molla a gas.



## Seduta ergonomica

disponibile in tre larghezze (40, 45 e 50 cm). Regolabile su due posizioni in profondità.



## Sistema blocco di sicurezza

pratico e sicuro per regolare in profondità il tavolo ergonomico.



## Fianchi chiusi

estraibili e girevoli lateralmente con **braccioli** regolabili in altezza.



## Poggiagambe

regolabile in altezza e inclinazione, con grande fascia di sostegno ai polpacci e imbottiture laterali.



## Pedana unica

ribaltabile e girevole lateralmente per facilitare l'accostamento dell'operatore e la salita/discesa dell'utente.



## Ruote

**Anteriori** da 17,5 cm (misura 40 e 45) e da 20 cm (misura 50).

**Posteriori** da 30,5 cm con **freno a tamburo** a comando unico e imperforabili.

# Componenti



**824-R tavolo reclinabile**, regolabile in profondità, con blocco di sicurezza.

**824-F tavolo fisso**, regolabile in profondità, con blocco di sicurezza.

*Tavolo costruito con materiale resistente e igienico, design senza spigoli, non intrappola residui di cibo.*



**896 Tappezzeria tavolo**  
Asportabile per il lavaggio.



**834 Cuneo Divaricatore imbottito** Regolabile in altezza ed in antero-posteriore.



**894 Cintura pelvica a 45°**



**827 Cinturini fermapiedi**



**892 Tappezzeria imbottita per pedana** Asportabile per il lavaggio.





**836 Tappezzeria schienale, sedile e poggiatesta**  
Asportabile per il lavaggio.




**933 Asta portaflebo**




# DuecentoTre5 misure e pesi

	misura 40	misura 45	misura 50
A: larghezza sedile	40 cm	45 cm	50 cm
B: larghezza ruote	52 cm	57 cm	62 cm
C: larghezza schienale	49 cm	54 cm	59 cm
D: ingombro in larghezza	59 cm	64 cm	69 cm
Peso Ausilio	25,4 Kg	26 Kg	26,5 Kg
Portata Massima	100 Kg	110 Kg	110 Kg
Altezza Utente	da 140 a 190 cm	da 140 a 190 cm	da 140 a 190 cm

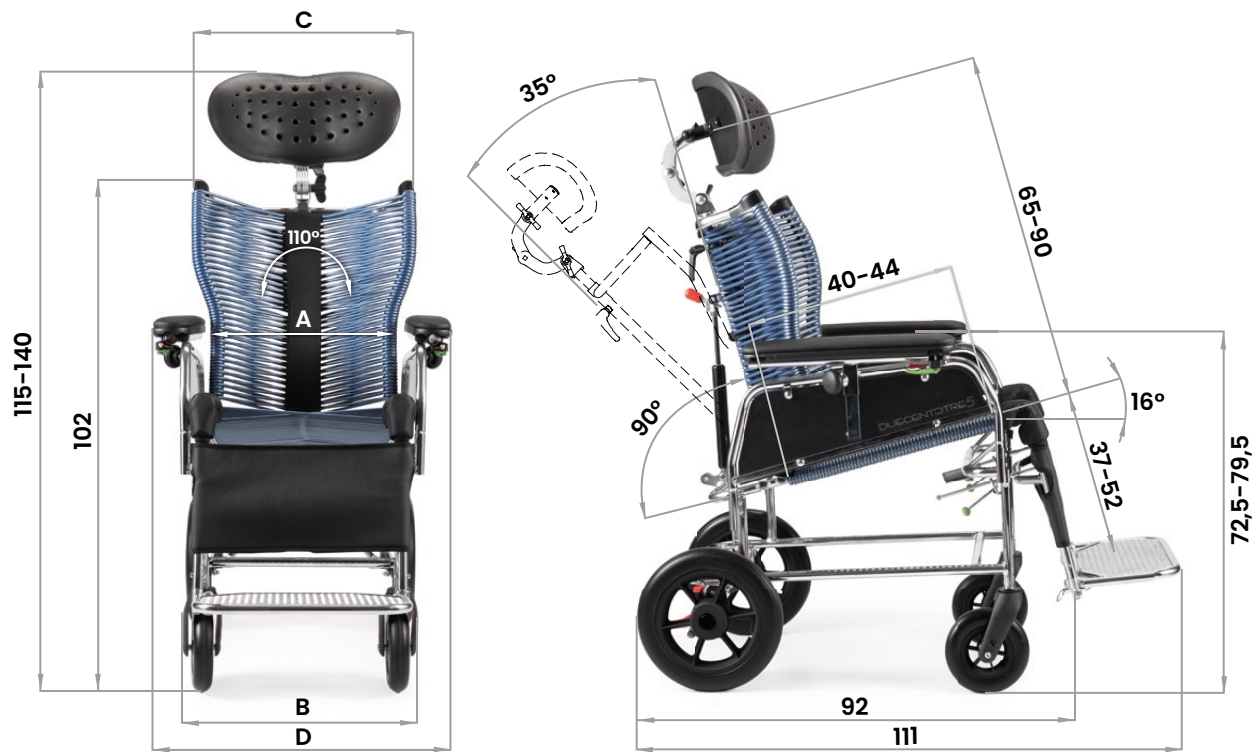





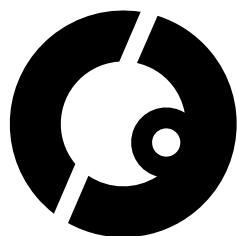

**CE** conforme a MDR (UE) 2017/745

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= **ISO 13485** =

---

**Ormesa srl** - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY  
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | [info@ormesa.com](mailto:info@ormesa.com)

**[www.ormesa.com](http://www.ormesa.com)**