



**ORMESA®**  
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

Duecentotré 5  
**DOCCIA**



# Duecentotre 5 **DOCCIA**

## Sicurezza per l'igiene quotidiana.

La **Duecentotre5 Doccia** di Ormesa è una **carrozzina doccia per adulti** sicura e confortevole, progettata per consentire la permanenza in posizione semi-sdraiata o seduta durante il lavaggio in doccia.

Il **bagno** è l'ambiente della casa dove avvengono la maggior parte degli **incidenti domestici** o **cadute accidentali**: lavare una persona con problemi di tipo motorio può essere scomodo e pericoloso sia per l'utente che per il caregiver. La carrozzina **Duecentotre5 Doccia** viene incontro alle esigenze di **sicurezza e praticità** di entrambi, assicurando **stabilità e igiene**.

Lo **schienale avvolgente** è di **forma a "V"** per un miglior contenimento del tronco; la sua struttura, assieme al **sedile basculato**, impedisce lo scivolamento in avanti dell'utente e favorisce lo **scarico del tronco su più punti**, escludendo la colonna vertebrale dallo sfregamento e dalla compressione.

PRODOTTO  
MARCATO **CE**

203-5 DOCCIA è un DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA definiti dal REGOLAMENTO (UE) 2017/745



# Benessere diffuso

## Tecnologia per vivere meglio

La **DuecentoTre5 Doccia** ha un telaio in alluminio verniciato con polveri epossidiche atossiche.

Il **rivestimento** è costituito da uno **speciale materiale** ignifugo, visco-elastico, igienico, lavabile ed altamente resistente all'usura. Assume le forme delle spalle e dei glutei dell'utente, garantendo un'**ampia traspirazione**, oltre che un efficace reflusso dell'acqua.

Lo **schienale** avvolgente di **forma a "V"** può essere fissato su due posizioni, per determinare due profondità di seduta, mediante bloccaggio su cremagliera posteriore.

La **seduta ergonomica** è basculata di 15° per non far scivolare in avanti l'utilizzatore.

La **reclinazione** dello **schienale** e del **poggiagambe** consentono di posizionare l'utente semi-sdraiato o seduto, mantenendo costante il **contenimento laterale del tronco-bacino**.



# Caratteristiche tecniche e regolazioni



## Poggiatesta

ampio, con rivestimento antibatterico, garantisce un corretto posizionamento del capo. Regolabile in inclinazione, altezza ed in senso antero-posteriore tramite volantini.



## Braccioli

estraibili e girevoli lateralmente.



## Pedana unica

regolabile in altezza e ribaltabile per facilitare l'accostamento dell'operatore e la salita/discesa dell'utente.



## Ruote

piene da 12 cm. Posteriori con freni.

# Componenti




**834 Cuneo divaricatore**  
regolabile in profondità.



**894 Cintura pelvica a 45°**


# DuecentoTre5 Doccia

## misure e pesi

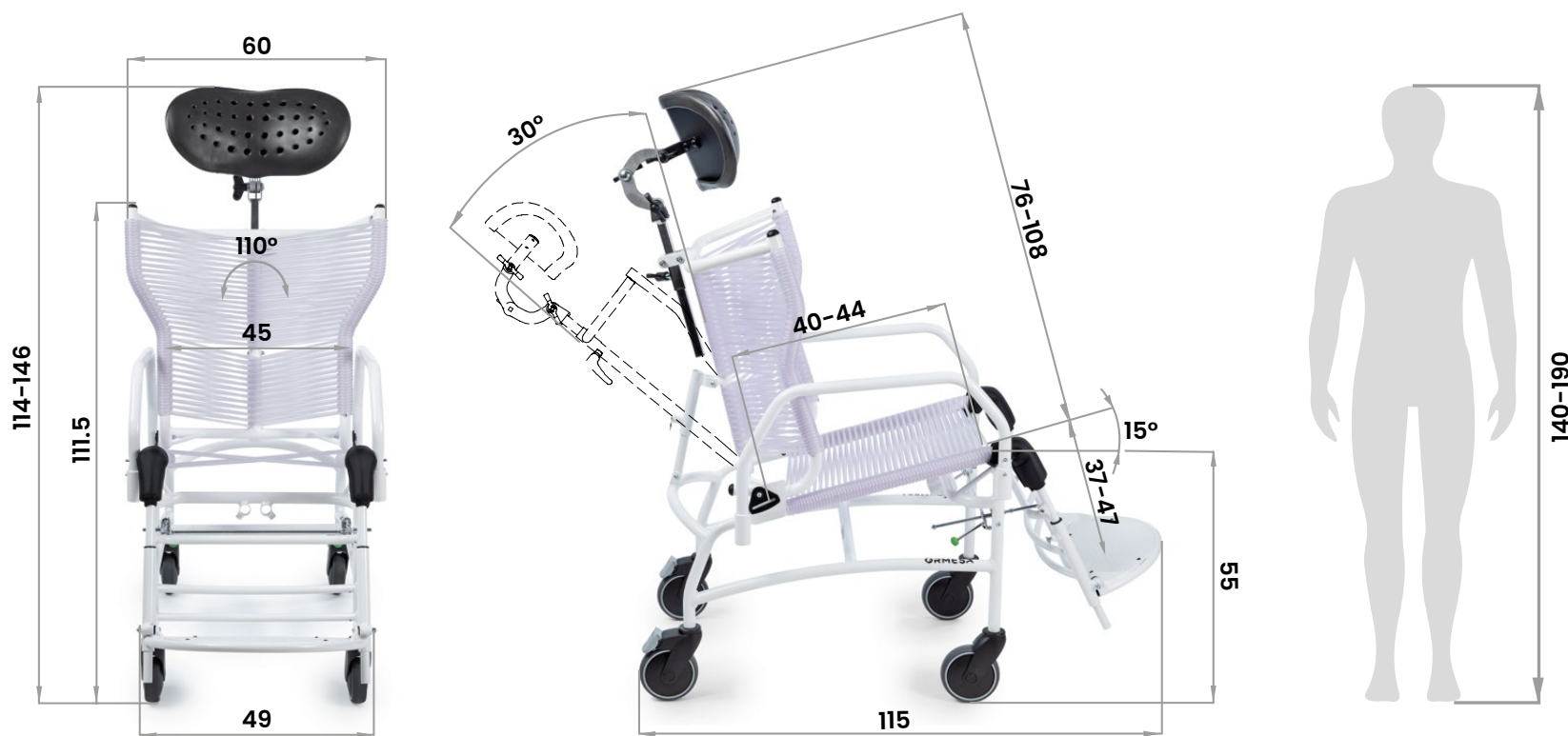

Peso Ausilio 15 Kg

Portata Massima 110 Kg

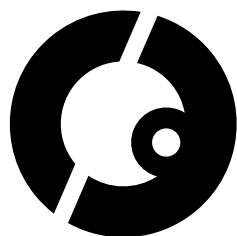

**CE** conforme a MDR (UE) 2017/745

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= **ISO 13485** =

---

**Ormesa srl** - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY  
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | [info@ormesa.com](mailto:info@ormesa.com)

**[www.ormesa.com](http://www.ormesa.com)**