

comprendente della cintura pelvica ad  
angolo variabile e pelotte al bacino



ISO 7176/19 e  
ANSI RESNA WC/19



tappeseria  
altamente  
traspirante ed  
ignifuga



Marcato CE



Attenzione!  
Leggere attentamente il  
manuale d'uso e manutenzione

DISTRIBUTORE/AGENTE:	DATA ORDINE:
	DATA CONSEGNA:
	NOME DESTINATARIO/UTENTE:

### CARATTERISTICHE

- **Più misure in un unico telaio**
- **Telaio** leggero pieghevole ad ombrello, in alluminio verniciato con polveri epossidiche atossiche. Una volta chiuso il Trollino rimane compatto e può essere trasportato come un trolley da viaggio.
- **Maniglie** di spinta con **freni manuali e di stazionamento**.
- **Schienale** resistente e robusto garantito dalla crociera sul retro. Reclinabile su tre posizioni e facilmente regolabile in altezza.
- **Seduta** leggermente basculata, facilmente regolabile in profondità e larghezza tramite pelotte al bacino imbottite. La crociera sottostante garantisce stabilità, comfort e resistenza.
- **Tappeseria** (non estraibile) estremamente **traspirante, resistente e facilmente lavabile**. **Ignifuga** secondo le *norme EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014*.
- **Borsetta** porta manuale e chiave sul retro dello schienale.
- **Poggiagambe** regolabile in altezza.
- **Pedane** ribaltabili e girevoli senza ingombro.
- **Ruote** imperforabili: anteriori piroettanti da 7" (17 cm) e posteriori da 10" (25 cm) con **freni indipendenti a tamburo**. **Leva di superamento gradini** su entrambe le ruote posteriori.

### Per Effettuare la scelta barra il quadratino bianco ☒

Colore Schienale    Colore Seduta: **Nero**    Colore Telaio: **Nero**



- Rosso
- Rosa
- Blu
- Nero

### MISURE

Unità di Misura: cm .



Peso ausilio: 14,8 kg  
Portata Massima: 55 kg

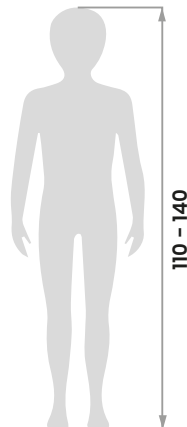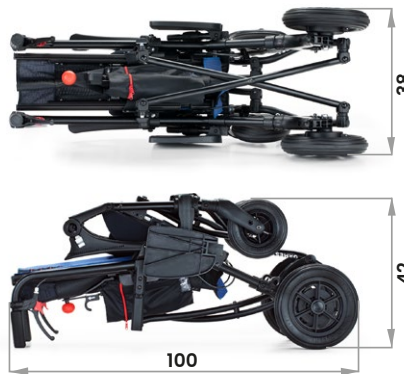

**A:** 28 cm con pelotte al bacino imbottite, 32 cm togliendo uno spessore interno, 36 cm senza pelotte.  
\*Range di regolazione in altezza con componente aggiuntivo 951 max. 105 cm.


**951** Maniglie di spinta regolabili in altezza.  
Senza l'uso di attrezzi.  
OPZIONABILE SOLO SE ORDINATE CON IL PRODOTTO



OPZIONABILI SUCCESSIVAMENTE

**865** Poggiatesta imbottito regolabile in altezza.

S-M

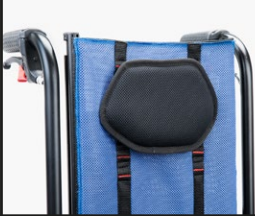

**835** Poggiatesta contenitivo e sagomato regolabile in altezza.

S-M



**838** Pelotte toracali regolabili in altezza, larghezza inclinazione ed in senso trasversale.

mini  S



**868** Pelotte frontali flessibili e avvolgenti per il tronco. Multiregolabili in altezza, larghezza ed inclinazione.

S



**947** Cintura pelvica ad angolo variabile. Fornita di serie.

S  M



**920** Cintura pelvica a 4 punti

S  M



**853** Pettorina a bretellaggio.

mini  S



**853 slim** Pettorina sagomata a quattro punti.

M



**834N** Divaricatore imbottito ed estraibile.



**839** Poggiamani regolabile in inclinazione.



**960** Fermatallon.



**956** Pedane con regolazione dell'inclinazione.



**858** Cestino portaoggetti.



**819** Cappottina elevabile, con borsetta e finestrella posteriore. Si chiude con il passeggero, non occorre toglierla.



**825** Sacca parapigioggia da fissare alla cappottina 819.



**825B** Telo posteriore di protezione da fissare alla sacca parapigioggia 825.



**818** Sacca termica.



**968** Imbottiture per braccioli



**844** Imbottiture laterali al telaio



**812** Direzionatori ruote anteriori.



**891** Ancoraggi (4 anelli) per il trasporto in direzione del senso di marcia su veicoli.



