



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

NOVUS



NOVUS

Massimo comfort di seduta.

Novus di Ormesa è un **passerino posturale per bambini e ragazzi** disponibile in due misure.

Dotato di **telaio pieghevole in alluminio**, è stato progettato per garantire all'utente il **massimo comfort**: la seduta è leggermente basculata, mentre il **cuscino**, imbottito ed asportabile, è **altamente traspirante**. Le **ruote** sono **dotate di freni a tamburo** ed estraibili con sistema a scatto, per facilitare il trasporto.

Grazie a un'ampia gamma di accessori per il **contenimento posturale**, Novus si adatta facilmente alle diverse esigenze di utilizzo.



Novus ha superato il **CRASH TEST** secondo la norma **ANSI RESNA WC/19**

PRODOTTO
MARCATO **CE**

NOVUS è un **DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA** definiti dal **REGOLAMENTO (UE) 2017/745**




Caratteristiche tecniche e regolazioni



Telaio pieghevole

in alluminio. Verniciato con polveri epossidiche atossiche.

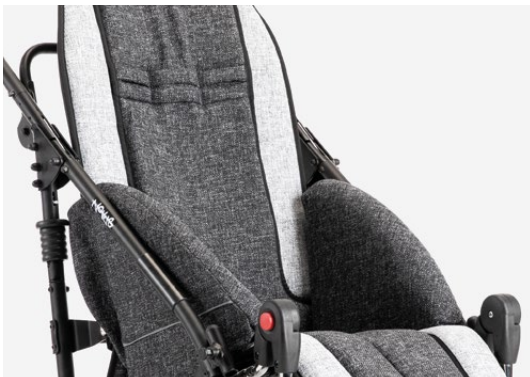

Cuscino asportabile

imbottito, ergonomico e agganciabile alla seduta regolabile tramite bottoni. È stato progettato per consentire di modificare la posizione delle pelotte al tronco e per aggiungere o togliere gli accessori senza influire sul comfort del bambino. Si adatta alla crescita del telaio.



**CERTIFICATO
MED annex A.1/3.19-20-21**



Schienale

regolabile in altezza e reclinabile.

Seduta

regolabile in profondità e larghezza attraverso le fianchette al bacino.



Poggiagambe

regolabile in inclinazione.

Pedana

ribaltabile, regolabile in altezza.



Ruote

estraibili, scorrevoli su cuscinetti a sfera.

Anteriori: impermeabili piroettanti da 17,5 cm.

Posteriori: pneumatiche da 30 cm con **freni indipendenti a tamburo**. Su richiesta sono fornibili con gomma impermeabile.



Componenti



852 Poggiatesta con protezioni parietali
regolabile in altezza e larghezza.



863 Poggiatesta con protezioni occipito parietali
regolabile in altezza, larghezza, inclinazione e antero-posteriore.



853 Pettorina a bretellaggio



903 Pettorina a bretellaggio a cinque punti



906 Cintura a bretellaggio a cinque punti



838 Pelotte toracali
regolabili in altezza e larghezza.

Componenti



868 Pelotte frontali avvolgenti per il tronco
regolabili in altezza e larghezza.



894 Cintura pelvica a 45°



844 Fasce imbottite di protezione laterale



834 Cuneo Divaricatore imbottito
regolabile in profondità.



834-R Cuneo Divaricatore imbottito regolabile
in profondità e abduzione.



824 Tavolo trasparente
con bordo e incavo. Regolabile in inclinazione e antero-posteriore.

Componenti




839 Appoggiamani



827 Cinturini fermapiedi



892 Tappezzeria imbottita per pedana

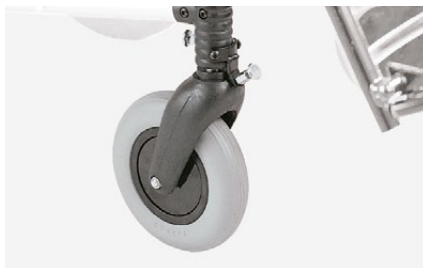

812 Direzionatori ruote anteriori



818 Sacca termica



819 Cappottina

Componenti



825 Sacca parapioggia
da fissare alla cappottina 819



905 Kit Freno manuale



922 Portabottiglia



858 Cestino in rete



911 Cestino porta respiratore



ORMESA




891 Ancoraggi (anelli)


Per il trasporto in direzione del senso di marcia su veicoli in movimento (auto private, bus omologati...).

Vedi manuale d'uso e manutenzione fornito con l'ausilio.

Novus misure e pesi

	novus 4
A: larghezza schienale	46 cm
B: larghezza sedile	da 28 a 38 cm
C: ingombro in larghezza	66 cm
D: altezza totale	107 cm
E: ingombro in lunghezza	96 cm
F: profondità seduta	da 39 a 45 cm
G: altezza schienale	da 75 a 81 cm
I: altezza pedana-seduta	da 30 a 44 cm
L: lunghezza passeggino chiuso senza ruote	110 cm
M: altezza passeggino chiuso senza ruote	42 cm
N: lunghezza passeggino chiuso con ruote	90 cm
O: altezza passeggino chiuso con ruote	56 cm
H: altezza utente	da 145 a 170 cm
Peso Ausilio con ruote	22,1 kg
Peso Ausilio senza ruote	18,5 kg
Portata Massima	65 kg

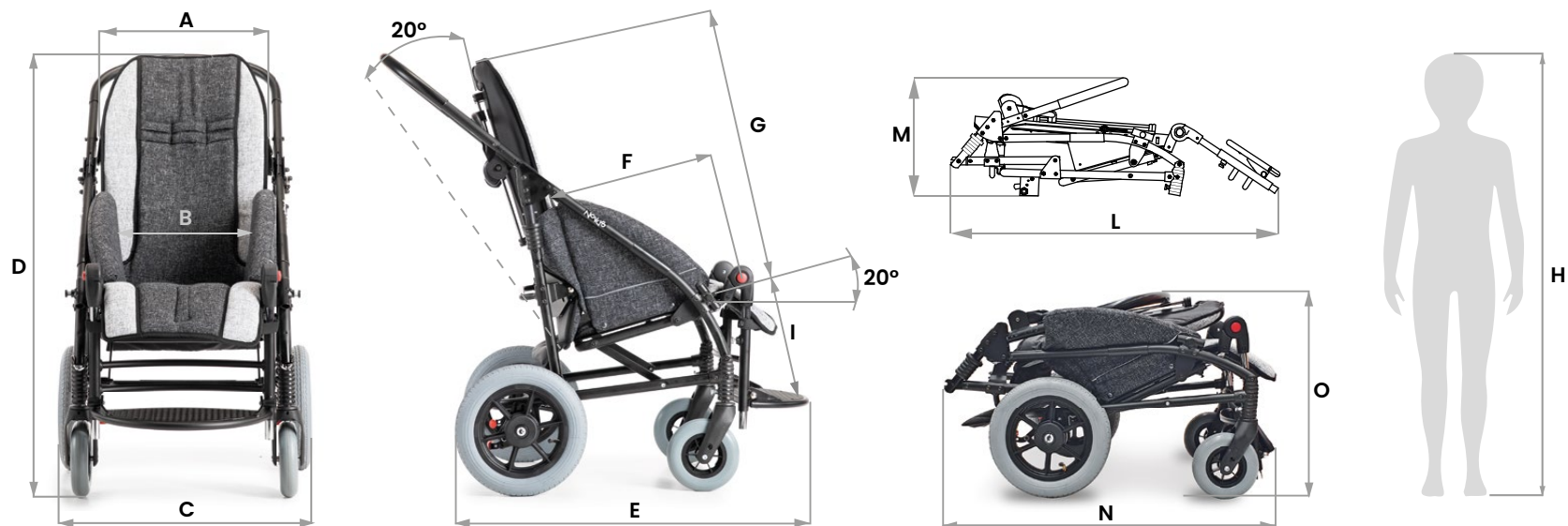

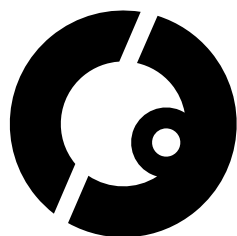

CE conforme a MDR (UE) 2017/745

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= **ISO 13485** =

Ormesa srl - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com