



ORMESA®
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

OBI



OBI

Compatto e resistente.

OBI di Ormesa è un **passettino per bambini e ragazzi** sicuro e resistente, dotato di telaio pieghevole in acciaio.

La scocca in nylon "Cordura Dupont" è estremamente longeva e lavabile con acqua, **ideale per un uso intensivo e continuato.**

OBI è dotato di un'ampia gamma di componenti.



Obi ha superato il **CRASH TEST** secondo la norma **ISO 7176/19**

PRODOTTO
MARCATO **CE**

OBI è un **DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA** definiti dal **REGOLAMENTO (UE) 2017/745**



Caratteristiche tecniche e regolazioni



Telaio pieghevole

in acciaio. Verniciato con polveri epossidiche atossiche.



Cuscino asportabile

rivestito con tessuto ignifugo, colori resistenti e lavabile in lavatrice.



CERTIFICATO
MED annex A.1/3.19-20-21

Scocca di nylon

“Cordura Dupont” di aspetto naturale, resistente all’uso prolungato e lavabile in acqua.



Schienale

rigido e reclinabile su 4 posizioni, con semplice bloccaggio a scatto.



Pedana

Ribaltabile con battitacco. Regolabile in altezza.



Ruote

Anteriori: imperforabili da 17,5 cm pivottanti, con cuscinetti a sfera.

Posteriori: imperforabili da 30 cm, scorrevoli su cuscinetti a sfera.



Componenti



835 Poggiatesta con protezioni parietali

Costruito da due elementi laterali, utilizzabili anche singolarmente (solo a destra o solo a sinistra). Capovolgendoli varia la posizione in altezza.



816 Cuscinetti di contenimento laterale per il tronco




834 Cuneo Divariatore imbottito



853 Cintura a bretellaggio




894 Cintura pelvica a 45°

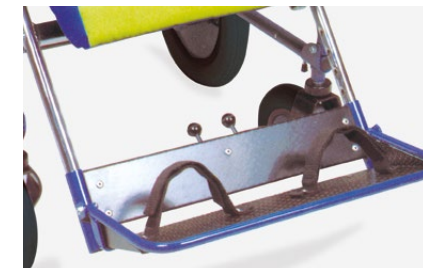

827 Cinturini fermapiedi

Componenti

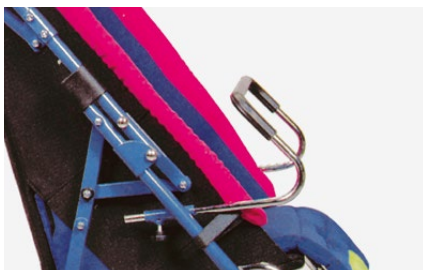

839 Appoggiamani



837 Tavolo senza incavo



819 Cappottina



825 Sacca parapioggia



818 Sacca termica



858 Cestino in rete

Componenti



812 Direzionatori ruote anteriori



891 Ancoraggi (anelli)



Per il trasporto in direzione del senso di marcia su veicoli in movimento (auto private, bus omologati,...).

Vedi manuale d'uso e manutenzione fornito con l'ausilio.



Obi misure e pesi


	obi 2	obi 3	obi 4
A: ingombro in larghezza	60 cm	62,5 cm	66,5 cm
B: larghezza sedile	33 cm	37 cm	41 cm
C: lunghezza totale	99 cm	109 cm	124 cm
D: altezza totale	97 cm	103 cm	105 cm
E: profondità seduta	30 cm	36 cm	40 cm
F: altezza schienale	62 cm	68 cm	76 cm
G: altezza pedana-seduta	da 23 a 35 cm	da 29 a 44 cm	da 32 a 47 cm
L: lunghezza passeggino chiuso	92 cm	95 cm	103 cm
M: altezza passeggino chiuso	50 cm	46 cm	51 cm
H: altezza utente	da 120 a 140 cm	da 135 a 155 cm	da 150 a 175 cm
Peso Ausilio	17,4 kg	18,5 kg	20,1 kg
Portata Massima	50 kg	60 kg	70 kg

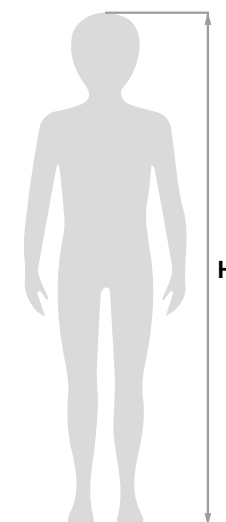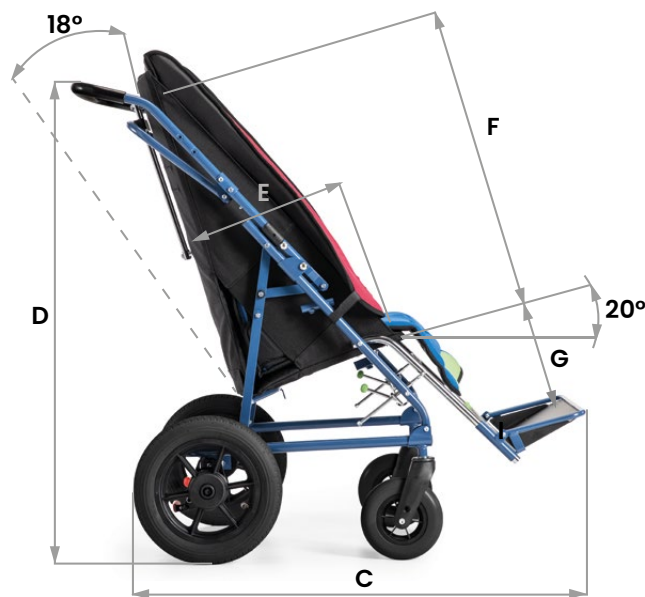





ORMESA[®]
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

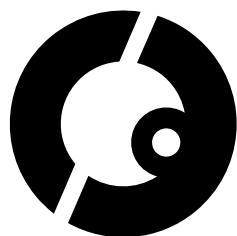

CE conforme a MDR (UE) 2017/745

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= **ISO 13485** =

Ormesa srl - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com