

ITALIANO - cod.220490 - 23/09/2022



**ORMESA®**  
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

**Tavolo**  
multifunzione



# Tavolo

## multifunzione

## Perfetta stabilità.

Il **Tavolo Multifunzione** di Ormesa è stato progettato per lo svolgimento di attività formative e lavorative e come completamento di altri dispositivi come sedie e/o seggioloni.

Fornisce un ampio piano di appoggio, ergonomico e funzionale allo svolgimento di attività manuali, alla lettura, consentendo di stabilizzare il tronco in modo da facilitare l'utilizzo funzionale degli arti superiori, organizzare una postura stabile che consenta una visione ampia e strutturata dello spazio, delle distanze e dell'ambiente che circonda il soggetto in posizione seduta.

Il **Tavolo Multifunzione** è disponibile in tre diverse misure: la misura small per bambini, la medium per ragazzi e la misura large per adulti.

PRODOTTO  
MARCATO 

TAVOLO MULTIFUNZIONE è un DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA definiti dal REGOLAMENTO (UE) 2017/745



# Massima praticità

## Trasporto e stoccaggio a portata di mano

### Nuovo design

**Leggero e abbattibile per il trasporto e lo stoccaggio.**  
Il suo peso contenuto permette di **trasportare anche la misura più grande come fosse una valigetta.**

Ha una base ampia per consentire il facile accesso della carrozzina/seggione. I piedini sono costruiti con materiale antiscivolo per una maggiore sicurezza.

Telaio verniciato con polveri epossidiche atossiche, previo trattamento antiossidante.



# Piano funzionale

## Tavolo dal design Ormesa

### Ergonomico

Piano tavolo dalla superficie ampia opportunamente sagomato con incavo per poter appoggiare gli avambracci e facilitare l'avvicinamento della persona.

Realizzato in un **materiale altamente resistente, facile da sanificare e igienico**. Design senza spigoli che non intrappola residui di cibo.

Regolabile in inclinazione con **sistema di sicurezza che impedisce il ribaltamento frontale del piano**.



Facilmente  
sanificabile





# Caratteristiche tecniche



## Sistema di regolazione in altezza

Sistema di regolazione semplice, affidabile e preciso: le levette consentono di serrare facilmente l'altezza desiderata mentre il sistema di frizionamento interno impedisce la caduta accidentale del piano tavolo.

## Tools free

Regolazioni senza l'utilizzo di attrezzi ma tramite levette, sicure e facili da azionare.



## Ferma libro e porta penne

Utile anche con il piano inclinato.



## Gancio


Laterale per riporre zaino o borsa.



# Tavolo misure e pesi

- A: larghezza tavolo
- B: larghezza base
- C: ingombro in lunghezza
- D: altezza terra - tavolo
- E: altezza tavolo chiuso
- F: lunghezza tavolo chiuso
- G: inclinazione tavolo (consigliato)
- I: larghezza incavo
- L: profondità incavo
- H: altezza utente
- Peso Ausilio

	small	medium	large
A: larghezza tavolo	64 cm	80 cm	80 cm
B: larghezza base	63 cm	80 cm	80 cm
C: ingombro in lunghezza	54 cm	61 cm	61 cm
D: altezza terra - tavolo	da 44 a 57 cm	da 53 a 77 cm	da 69 a 108 cm
E: altezza tavolo chiuso	17 cm	16 cm	16 cm
F: lunghezza tavolo chiuso	84 cm	104 cm	120 cm
G: inclinazione tavolo (consigliato)	da 0° a 60°	da 0° a 60°	da 0° a 60°
I: larghezza incavo	38,3 cm	42,4 cm	42,4 cm
L: profondità incavo	16 cm	14 cm	14 cm
H: altezza utente	da 75 a 90 cm	da 85 a 120 cm	da 115 a 170 cm
Peso Ausilio	6,7 kg	8,2 kg	9,2 kg

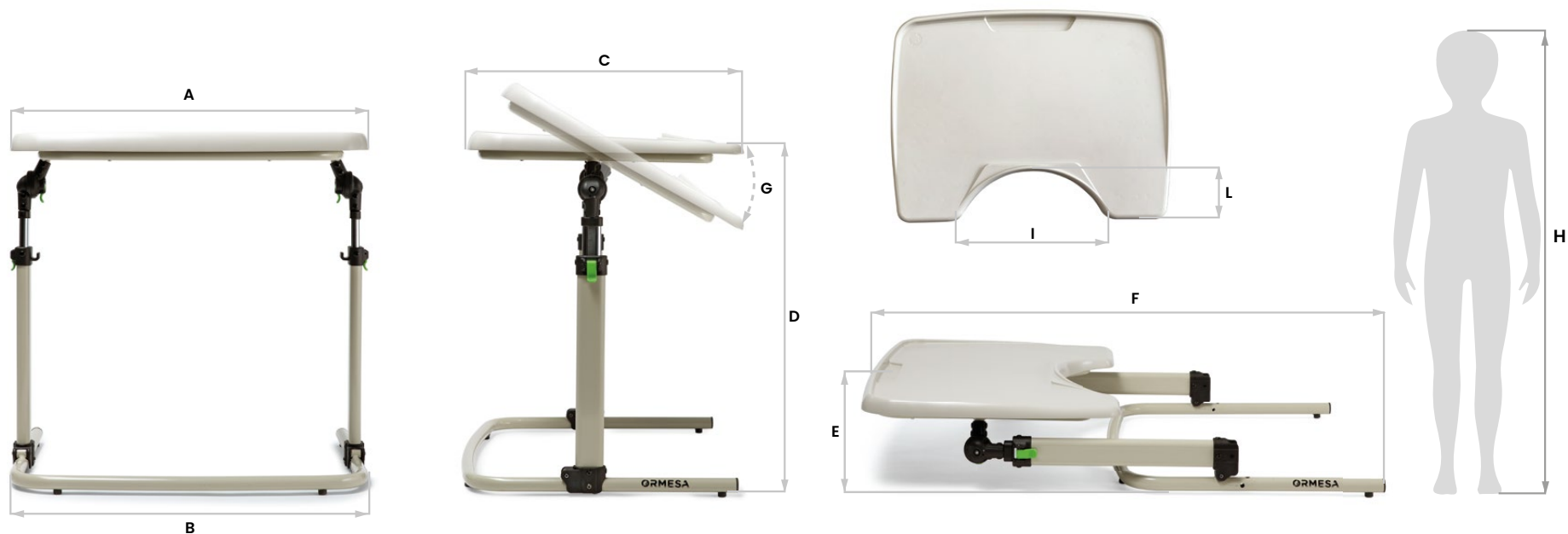










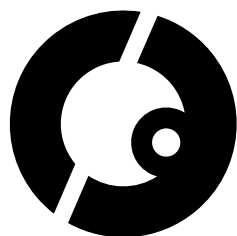

**CE** conforme a MDR (UE) 2017/745

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= **ISO 13485** =

---

**Ormesa srl** - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY  
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | [info@ormesa.com](mailto:info@ormesa.com)

**[www.ormesa.com](http://www.ormesa.com)**