



ORMESA®

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

OBI



OBI

Compatto e resistente.

OBI di Ormesa è un **passettino per bambini e ragazzi** sicuro e resistente, dotato di telaio pieghevole in acciaio.

La scocca in nylon "Cordura Dupont" è estremamente longeva e lavabile con acqua, **ideale per un uso intensivo e continuato.**

OBI è dotato di un'ampia gamma di componenti.



Obi ha superato il **CRASH TEST** secondo la norma **ISO 7176/19**

PRODOTTO
MARCATO **CE**

OBI è un **DISPOSITIVO MEDICO CONFORME AI REQUISITI DI SICUREZZA** definiti dal **REGOLAMENTO (UE) 2017/745**



Caratteristiche tecniche e regolazioni



Telaio pieghevole

in acciaio. Verniciato con polveri epossidiche atossiche.



Cuscino asportabile

rivestito con tessuto ignifugo, colori resistenti e lavabile in lavatrice.



CERTIFICATO
MED annex A.1/3.19-20-21

Scocca di nylon

“Cordura Dupont” di aspetto naturale, resistente all’uso prolungato e lavabile in acqua.



Schienale

rigido e reclinabile su 4 posizioni, con semplice bloccaggio a scatto.



Pedana

Ribaltabile con battitacco. Regolabile in altezza.



Ruote

Anteriori: imperforabili da 17,5 cm pivottanti, con cuscinetti a sfera.

Posteriori: imperforabili da 30 cm, scorrevoli su cuscinetti a sfera.



Componenti




835 Poggiatesta con protezioni parietali

Costruito da due elementi laterali, utilizzabili anche singolarmente (solo a destra o solo a sinistra). Capovolgendoli varia la posizione in altezza.



816 Cuscinetti di contenimento laterale per il tronco

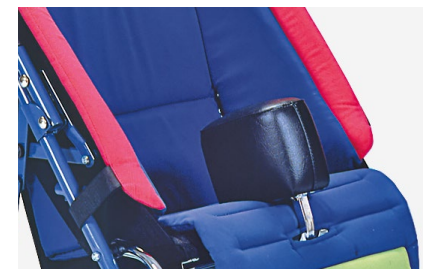


834 Cuneo Divariatore imbottito



853 Cintura a bretellaggio




894 Cintura pelvica a 45°

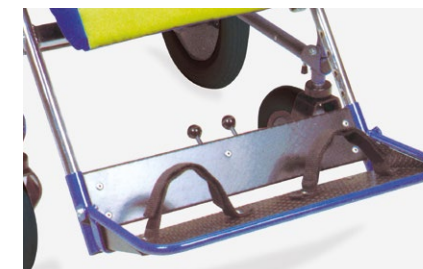

827 Cinturini fermapiedi

Componenti

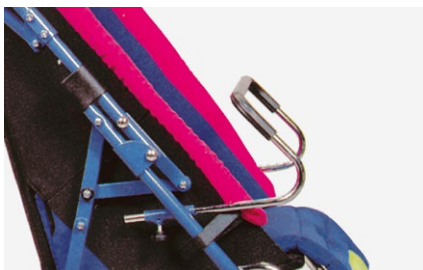

839 Appoggiamani



837 Tavolo senza incavo



819 Cappottina



825 Sacca parapiovvia



818 Sacca termica



858 Cestino in rete

Componenti



812 Direzionatori ruote anteriori



891 Ancoraggi (anelli)

Per il trasporto in direzione del senso di marcia su veicoli in movimento (auto private, bus omologati,...).


Vedi manuale d'uso e manutenzione fornito con l'ausilio.



Obi misure e pesi

obi 4


A: ingombro in larghezza.....	66,5 cm
B: larghezza sedile.....	41 cm
C: lunghezza totale.....	124 cm
D: altezza totale.....	105 cm
E: profondità seduta.....	40 cm
F: altezza schienale.....	76 cm
G: altezza pedana-seduta.....	da 32 a 47 cm
L: lunghezza passeggino chiuso.....	103 cm
M: altezza passeggino chius.....	51 cm
H: altezza utente.....	da 150 a 175 cm
Peso Ausilio.....	20,1 kg
Portata Massima.....	70 kg

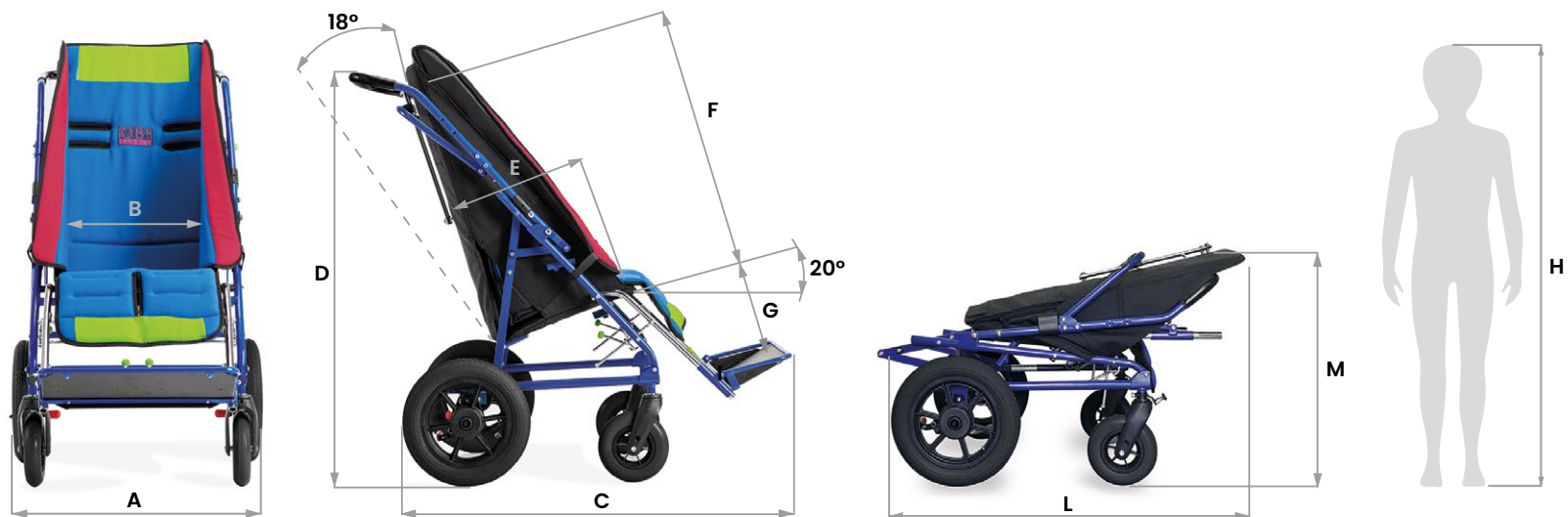





ORMESA[®]
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

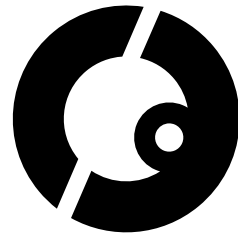

CE conforme a MDR (UE) 2017/745

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
[ISO 13485](#)

Ormesa srl - Via delle Industrie 6/8 | 06034 Foligno (PG) - ITALY
Tel. +39 0742 22927 | FAX +39 0742 22637 | info@ormesa.com

www.ormesa.com

